



Dr. William Clark

TransForce®


Dispositivo per lo sviluppo dell'arco

Sviluppato con la collaborazione del Dr. William Clark

Gli Apparecchi Transforce® sono disponibili in due modelli, Trasversale e Sagittale. Entrambi i modelli possono essere usati per tutte le classi di malocclusione e sono eccellenti per dentizioni miste. Entrambi i modelli si montano lingualmente, il che li rende poco evidenti e non richiedono la collaborazione del paziente. Gli apparecchi Transforce® sono stati sviluppati con il consulto del Dr. William Clark, l'inventore del Twin Block.

TransForce Trasversale

L'apparecchio Trasversale ha un modulo di espansione per aumentare la larghezza inter-canina (si espande ai canini) e può essere usato nell'arcata superiore o inferiore quando l'espansione è richiesta per risolvere un affollamento nei segmenti labiali o per correggere l'arcata quando questa è ristretta.

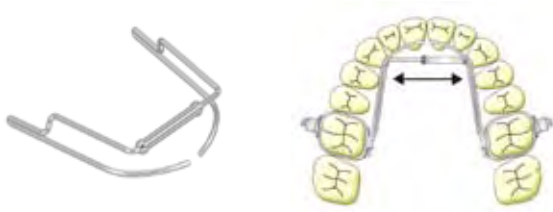

TransForce Sagittale

L'apparecchio Sagittale è studiato specificatamente per lo sviluppo dell'arcata anteriore (crea spazio avanzando da 3x3 labialmente nel superiore o nell'inferiore ed è spesso indicato per un uso simultaneo in entrambe le arcate. L'apparecchio opera sul principio dello scivolamento e può essere utilizzato unilateralmente o bilateralmente per estendere la lunghezza dell'arco.



Assistenza praticamente invisibile per lo sviluppo dell'arco

Gli Apparecchi *TransForce* preprogrammati per una diagnosi veloce. Entrambi i modelli, Trasversale e Sagittale, possono essere adattati sul paziente senza l'aiuto del laboratorio. Per l'adattamento sono necessarie delle bande con il tubo linguale .036 x .072.

Il *TransForce* presenta dei braccetti malleabili paralleli al bordo incisale per un facile adattamento e ogni espansore contiene molle al nickel titanio che generano circa 200 gr. di forza. I moduli sono simili a quelli del *Twin Force®* Bite Corrector e generano forze leggere biocompatibili.

Gli Apparecchi *TransForce*, Trasversale e Sagittale, sono disponibili in diverse misure per lo sviluppo dell'arcata superiore e inferiore e possono essere ordinate in un kit iniziale assortito. Anche un Template del *Transforce®* è disponibile per assistervi nelle diagnosi. (Figure 1-2).

Figura 1 - Template *TransForce* Trasverso


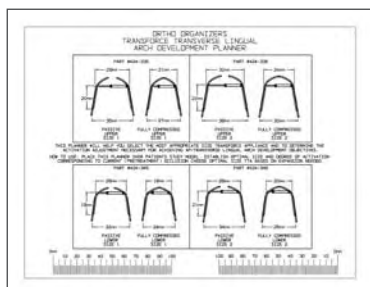


Figura 2 - Template *TransForce* Sagittale

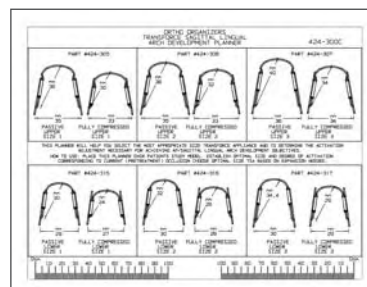

TransForce Trasverso

Descrizione	Codice Catalogo
Superiore Trasverso Misura 1 (29mm)	424-335
Superiore Trasverso Misura 2 (32mm)	424-336
Inferiore Trasverso Misura 1 (26mm)	424-345
Inferiore Trasverso Misura 2 (28mm)	424-346
Template per Trasverso	424-330C
Kit Trasverso - (Include: 1 - Superiore Misura 1 e 2, 1 - Inferiore Misura 1 e 2, e 1 - Template)	424-330

TransForce Sagittale

Descrizione	Codice Catalogo
Superiore Sagittale Misura 0 (34mm)	424-304
Superiore Sagittale Misura 1 (36mm)	424-305
Superiore Sagittale Misura 2 (38mm)	424-306
Superiore Sagittale Misura 3 (40mm)	424-307
Inferiore Sagittale Misura 0 (28mm)	424-314
Inferiore Sagittale Misura 1 (30mm)	424-315
Inferiore Sagittale Misura 2 (32mm)	424-316
Inferiore Sagittale Misura 3 (34mm)	424-317
Template Sagittale	424-300C
Kit Sagittale Superiore (Include: 1 per misura)	424-301
Kit Sagittale Inferiore (Include: 1 per misura)	424-311
Kit Sagittale (Include: 1 - Superiore Misura 1 e 2, 1 - Inferiore Misura 1 e 2, e 1 - Template)	424-300



Per maggiori informazioni sui nostri prodotti ed offerte didattiche, si prega di contattare:
TARGET Ortodonzia s.r.l.

Via XX Settembre, 5 - 20024 Garbagnate M.se (MI)

Tel. 02.99020274 r.a. Fax 02.9957168

email: info@Targetortodonzia.it

web: www.targetortodonzia.it



1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
USA

Distribuito in Italia da Target s.r.l.